


Eenvoudig ERAF


Verwijderen

De hechtsterkte is goed gebalanceerd zodat brackets, banden en andere hulpmiddelen gedurende de behandeling uitstekend vastzitten maar nadien, tijdens het verwijderen ervan, raakt het glazuur niet beschadigd. Het van nature vochtige mondmilieu helpt de hechtkracht in stand te houden, zodat de voorzieningen goed vastzitten tijdens de totale behandelingsduur.

Hechtsterkte brackets

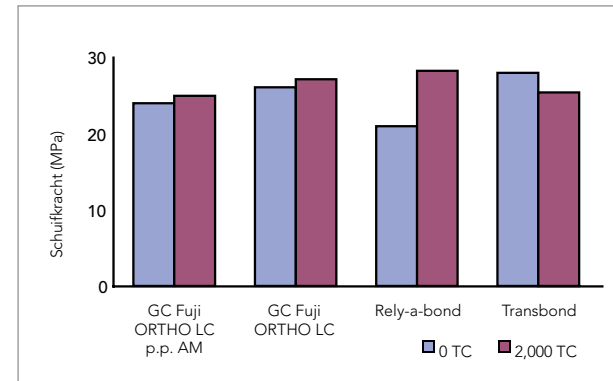

Hechtsterkte banden

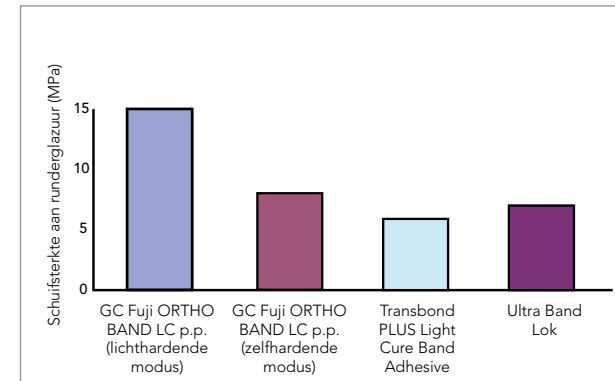

Interne gegevens GC R&D, Japan

Uitstekend resultaat

Onmiddellijk na verwijdering van de banden en brackets met GC Fuji ORTHO LC



Aanhoudende afgifte van fluoride helpt het glazuur beschermen

Onmiddellijk na verwijdering van de banden en brackets die met kunstharsecement zijn aangebracht



Onvoldoende bescherming door fluoride om White Spots te voorkomen

Het GC Fuji ORTHO productgamma

Zelfuithardend



Fuji ORTHO

Poeder/vloeistof
Introductiekit:
40 g poeder, 2 x 6,8 ml vloeistof
Navulling:
40 g poeder, 6,8 ml vloeistof



Fuji ORTHO Band Paste Pak

Navulling:
2 x 13,3 g, 7,2 ml
Paste Pak cartridge met mengblok

Lichtuithardend



Fuji ORTHO LC

Poeder / vloeistof
Introductiekit:
15 g poeder, 6,8 ml vloeistof
Navulling:
40 g poeder, 6,8 ml vloeistof
Capsules
50 capsules
(gemengd volume per capsule 0,10 ml)



Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix

Navulling:
2 x 13,3 g, 7,2 ml
Paste Pak cartridge met mengblok
Starter Set:
1 x 13,3 g, 7,2 ml Paste Pak cartridge,
20 x mixing tip LC,
2 x ORTHO Gel Conditioner,
15 brush tips



Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix

Navulling:
2 x 13,3 g, 7,2 ml
Paste Pak cartridge met mengblok

Verwante producten



Paste Pak dispenser



Applicatietang voor capsules



GC ORTHO-conditioner



GC ORTHO-gelconditioner



GC Mixing tips LC

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.
Edisonbaan 12
NL - 3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

Gemakkelijk **EROP** -
Eenvoudig **ERAF**

Orthodontisch bevestigen
eenvoudiger dankzij **GC**.



Fuji ORTHO
van **GC**.

Combineert fluoride-afgifte en een gemakkelijke verwerking met een optimale hechtsterkte die nodig is voor orthodontische toepassingen. Het GC Fuji ORTHO productgamma biedt uitstekende oplossingen voor de beste resultaten en voor tevreden patiënten.

Gemakkelijk EROP

DE GC Fuji ORTHO kunsthars versterkte glasionomeren bieden **superieure resultaten** dankzij de **eenvoudige behandelingsprocedure**, **fluoride- bescherming** en **probleemloze verwijdering** van brackets en banden na het voltooiën van de behandeling.

Cementeergemak is troef

De eenvoudige cementeerprocedures van de verschillende Fuji ORTHO producten zijn gegarandeerd, aangezien etsen niet nodig is en het werkgebied niet droog hoeft te worden gehouden. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat de behandelaar geen tijd of materiaal verspilt tijdens de orthodontische cementeerprocedures.

Stap-voor-stap



Plaats de met cement bestreken bracket op het gebitselement, waarbij het tandoppervlak niet uitgedroogd mag zijn.



Belicht de bracket gedurende 5 seconden en verwijder overtollig materiaal met een scaler.



Belicht elk vlak met cement tenslotte gedurende 20 seconden.

Dr. A. Komori, Japan

Uitstekende bescherming

Aangezien etsen niet nodig is, worden de elementen tijdens de voorbereidende fase niet beschadigd. Voor extra bescherming en hechtsterkte gebruikt u de ORTHO GEL Conditioner gedurende 10 seconden om het glazuur te conditioneren.




Reinig en polijst het tandoppervlak grondig.




Breng Fuji Ortho Gel Conditioner aan en spoel dit na 10 sec. eraf.

Dr. A. Komori, Japan

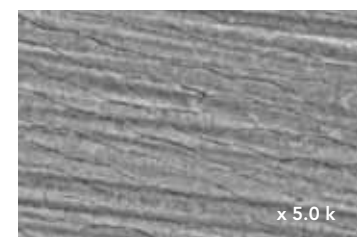


Conditionering met ORTHO Gel Conditioner x 5.0 k

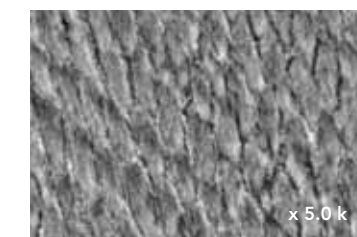

Glazuurstructuur na het etsen met fosforzuur x 5.0 k

Fluoride-afgifte

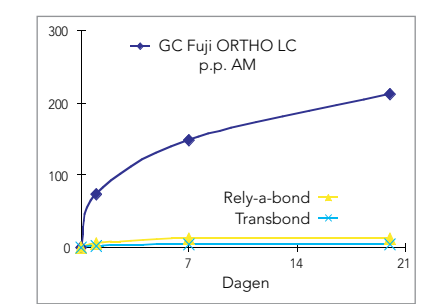

Interne gegevens GC R&D, Japan

De constante fluoride-opname en -afgifte welke inherent is aan glasionomeren, geeft bescherming aan het glazuur rondom de orthodontische brackets en banden door een inhibitiezone te creëren. Dit verlaagt het risico van het ontstaan van White Spots tijdens de orthodontische behandeling.

Kenmerken en voordelen	Zelfuithardend		Lichtuithardend			
	Fuji ORTHO Poeder/Vloeistof		Fuji ORTHO LC Poeder/Vloeistof		Fuji ORTHO LC Capsule	
Poeder / vloeistof De meest voordelige leveringsvorm Flexibiliteit bij het doseren van de benodigde hoeveelheid						
Capsules Snel, gemakkelijk en direct te appliceren Biedt de meest correcte mengverhouding						
Pasta-pasta Gemakkelijk zonder luchtballen te doseren Naar keuze Automix of handmatig mengen De te doseren hoeveelheid naar keuze maar altijd in de juiste mengverhouding		Fuji ORTHO Band Paste Pak			Fuji ORTHO LC Paste Pak Automix	Fuji ORTHO Band LC Paste Pak Automix
Mengtijd	30"	15"	30"	10"	None	15"/ none
Verwerkingstijd	2'50"	3'30"	3'15"	3'00"	5'00"	3'30"
Uithardingstijd	3'00"	3'00"	20"	20"	20"	20"
Filmdikte	23 µ	3 µ	24 µ	30 µ	18 µ	3 µ

