


Une solution mains libres
pour la capture d'aérosols
extra-buccaux

Support pour HVE autonome A-dec®

Efficacité et sécurité combinées dans une solution pratique pour la capture des aérosols. Le **support pour HVE autonome A-dec** facilite la pratique de la dentisterie à deux mains tout en permettant le contrôle essentiel des aérosols. Le bras flexible positionne solidement l'embout HVE à moins de 2,5 cm de la cavité buccale, ce qui permet une capture précise et sans effort des aérosols tout en gardant les mains libres pour tenir les détartreurs et les instruments. C'est un moyen simple et abordable de rendre votre cabinet encore plus fonctionnel.

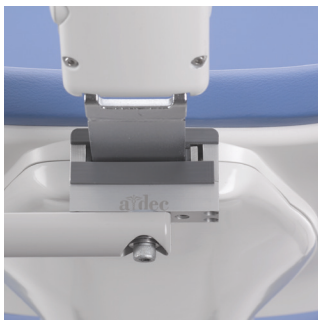

La pince à glissière se fixe solidement à votre fauteuil A-dec sans outils spéciaux.



Sa conception flexible permet de s'adapter aux patients de toutes tailles, pour qu'ils puissent s'installer et se relever facilement du fauteuil.



D'une utilisation mains libres à une prise en main directe : il suffit de soulever le HVE de son support pour le contrôler directement.



Il s'ajuste facilement aux cliniciens droitiers ou gauchers, et aux procédures à quatre mains.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Permet la capture des aérosols en mode mains libres avec les systèmes HVE 11 mm ou 15 mm existants
- Peut être positionné à moins de 2,5 cm de la cavité buccale
- Un bras flexible pour un positionnement simplifié
- Conception arrondie ambidextre pour les droitiers et les gauchers
- S'adapte aux patients de toutes tailles
- Convient à la plupart des fauteuils dentaires A-dec
- Rapide et facile à installer



Description du produit	Compatibilité avec les fauteuils A-dec	N° de référence A-dec
Support pour HVE de 15 mm autonome (utilisé en France)	Convient à tous les fauteuils A-dec sauf le modèle 311A Single Piece Back et Performer Narrow Back	11.1387.00
Support 11 mm pour HVE autonome	Le fauteuil Cascade 1040 nécessite un clip supplémentaire (N° réf. 11.1391.00)	11.1388.00

Pour en savoir plus sur le support pour HVE autonome A-dec, rendez-vous sur le site a-dec.com/360 ou contactez votre revendeur agréé local.