

Caractéristiques

1 seringue à trois voies (air/eau/spray) avec embouts stérilisables

2 tuyaux d'instruments avec lumière (raccordements à 6 voies)

Système d'eau de spray en circuit fermé pour seringue à trois voies et instruments (un clapet anti-retour prévient la contamination de l'eau de spray)

Réservoir d'eau de spray : 0,75 litre

Régulateur d'air et d'eau pour chaque instrument

Tuyau (6 mm × 4 mm) pour le raccord d'air

Pédale

Caractéristiques techniques

Consommation d'air des instruments : 35–55 l/min

Pression de service : 2,5–3,5 bar

Carter : acier inoxydable

Poids : 5,1 kg

Dimensions : 280 mm × 180 mm × 240 mm

Garantie : 2 ans


Options : détartreur électrique, lampe de polymérisation, moteur électrique, moteur à air, turbine, contre-angles, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE etc.

Denta-Boy 202

La plus petite unité de soins au monde

Le DENTA-BOY 202 est synonyme de qualité au format miniature.

Grâce à ses dimensions réduites le DENTA-BOY 202 prend très peu de place dans le local de soins. Une poignée permet de le transporter à la main en tout confort jusqu'au prochain lieu de soins. Le DENTA-BOY 202 est équipé d'une seringue à trois voies et de deux instruments librement sélectionnables.

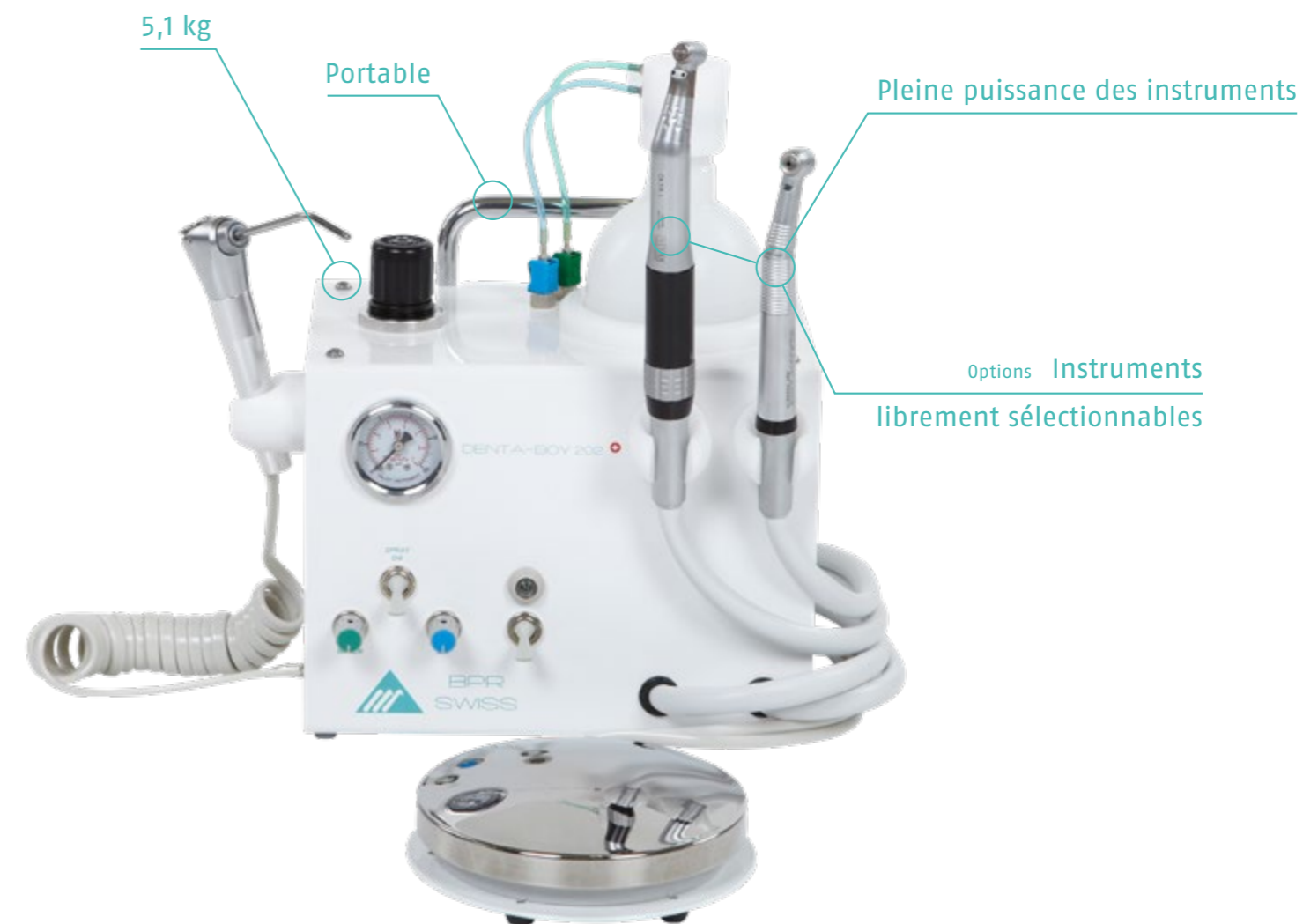

-  Fonctionnement Continu
-  Pleine Puissance
-  Portable/Léger