

A-dec 4000

a-dec®



Ce qui fait la différence d'A-dec

Vous pouvez compter sur les produits A-dec pour travailler de manière harmonieuse et rester concentré sur l'essentiel : *le patient*.

Réduisez les temps d'indisponibilité. Maintenez des coûts de possession peu élevés. Envisagez des performances à long terme.

Aucun autre fabricant d'équipement dentaire ne consacre autant de soin et d'efforts à la conception, à la réalisation et au suivi de ses produits. C'est la raison pour laquelle les dentistes, les écoles dentaires et les cliniques du monde entier font confiance à A-dec.







Accessible. Robuste. Élégant.


L'A-dec 400 allie design et fonctionnalité pour privilégier l'élégance plutôt que la complexité à un prix très attractif. Ne sacrifiez pas l'ergonomie de l'accès à la cavité buccale au confort du patient, mais profitez de ces deux avantages.

Et lorsque vous ajoutez la construction robuste, le style contemporain et la polyvalence gauche/droite, vous obtenez un unit représentant la valeur à long terme la plus sûre disponible sur le marché.

A-dec 400, une approche réfléchie de la conception du matériel dentaire.

Goûtez à une fiabilité légendaire.

Ingénierie soignée. Fonctionnalité anti-fatigue. Une sécurité à toute épreuve.
La philosophie de conception d'A-dec consiste avant tout à innover et non à compliquer. Avec l'A-dec 400, vous investissez dans le confort. Jour après jour.
Année après année.

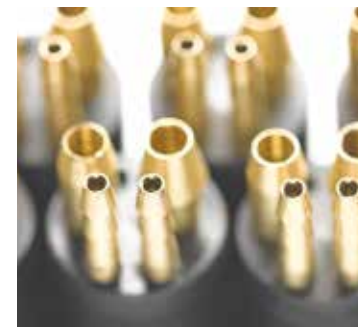



Confort absolu

Le confort du patient est essentiel pour réduire son anxiété. Le fauteuil A-dec 400 est conçu pour mettre à l'aise votre patient.

Pivot virtuel. Permet de synchroniser le mouvement du fauteuil avec l'anatomie et les gestes du patient.

Tête à double articulation. Se règle facilement pour un positionnement optimal du patient.

Accoudoirs à deux positions. Combinent un support pour les bras/coudes et un design porteur robuste afin de faciliter l'entrée et la sortie du patient.

Repose-jambes à inclinaison. Permet au patient de reposer confortablement le bas de ses jambes.

Garniture luxueuse. Comprend des styles sobres sans couture et d'autres luxueux avec coutures dans toute une palette de couleurs.













Une carrière qui ne nuit pas à votre santé

Pour conjuguer productivité et longévité de carrière, vous devez travailler dans une position confortable. C'est pourquoi l'A-dec 400 est conçu pour assurer la fluidité et l'alignement ergonomique de vos mouvements.

Dossier souple ultra-fin. Vous permet de caler vos genoux sous le fauteuil et d'avoir un accès ergonomique optimal à la cavité buccale.

Point de base bas. Permet au praticien de travailler confortablement, quelle que soit la hauteur.

Options de l'unit ergonomique. Instruments et accessoires sont à votre portée, pour que vous restiez concentré avec une économie de mouvements.





Atouts de votre A-dec 400

Polyvalence gauche/droite pour une productivité accrue. Configuration ambidextre complète pour s'adapter aux différentes préférences des praticiens. L'unit Radius et les modules de maintien effectuent une rotation rapide autour du fauteuil pour assurer une compatibilité gauche/droite complète.

Lutte contre les infections de l'intérieur. Au cœur de l'unit se trouve un bloc de commandes conçu pour préserver la santé du patient et garantir des performances infaillibles. L'eau captive et stagnante est minimisée. De l'eau circule dès que vous activez vos instruments.

Système indépendant d'entretien du circuit d'eau. Contre les odeurs, les refoulements et la décomposition, les tubulures d'A-dec ont subi un traitement antimicrobien à l'AlphaSan®. Le tube de prélèvement de la bouteille de 2 litres et le raccord à démontage rapide facilitent le retrait et le remplacement tout en réduisant le risque de contamination croisée.

Support d'écran avec précâblage dissimulé. Le design du support offre une manœuvrabilité remarquable tout en ne laissant visible aucun cordon.

Pivot à 60° avec frein. Permet une rotation du fauteuil de 30° de chaque côté du centre.

Complètement ambidextre.

Configurations selon la manière dont vous souhaitez travailler. Les units offrent une solution de distribution de face, de côté ou par l'arrière. Les instruments d'assistant sont également dotés de l'inversion gauche/droite, avec un bras court ou long (voir ci-contre).





Intégration homogène

Le fauteuil A-dec 400 et l'unit A-dec 300 combinent à la perfection manœuvrabilité compacte et style authentique. L'unit A-dec 300 est conçu pour être petit à l'extérieur et grand à l'intérieur.

Commande simple et intelligente. La commande des instruments dentaires, des accessoires intégrés, du fauteuil et de l'éclairage dentaire est simplifiée grâce au clavier Deluxe et à la pédale de commande de l'A-dec 300. Préréglez la caméra intraorale, l'instrument à ultrasons, la lampe à polymériser et jusqu'à deux moteurs électriques.

Moderne et évolutive. La plate-forme de l'unit vous permet d'ajouter les toutes dernières innovations en matière de produits cliniques.

Bouton-poussoir pour le frein du bras flexible. Bloquez la position de l'unit à la hauteur qui vous convient pour un confort ergonomique optimal.

Distribution ergonomique.

Ayez tous vos instruments et accessoires là où vous souhaitez qu'ils soient. Votre unit est disponible dans les styles Continental ou Traditional.



Options A-dec 400

Units

Quatre choix de présentation ergonomique pour vos instruments et accessoires : Unit A-dec 300 monté sur fauteuil Traditionnel et Continental ; Unit A-dec 500 monté sur meuble 12 o'clock duo et side.

Éclairage

Qu'il soit à LED ou à halogène, un éclairage A-dec fournit toujours une intensité lumineuse optimale et un spectre uniforme, sans zones d'ombre indésirables. Votre éclairage A-dec s'allume automatiquement lorsque le fauteuil s'incline, et s'éteint dès qu'il revient en position d'entrée/sortie.

Instruments d'assistant montés sur fauteuil

Disponible en bras court et bras long avec un clavier intégré. Choix d'un support 3 ou 4 positions simples ou d'un support 2 positions doubles.

Support d'écran

Le bras à double articulation comprend des chemins pour les câbles HDMI et d'alimentation. Le support d'écran de côté tourne à 430° et pivote jusqu'à 85° pour adapter la vue dans les positions assises ou allongées.

Crachoir

Fabrique en porcelaine vitrifiée résistante aux taches. Pivote à $\pm 90^\circ$ pour un meilleur accès au patient. Les fonctions remplissage du gobelet et rinçage du crachoir sont programmables avec le clavier.



Garniture sans coutures



Garniture avec coutures



Caractéristiques techniques

Fauteuil A-dec 400

Plage de la hauteur de levée	de 349 mm à 794 mm (de 13,75 po à 31,25 po) ; point bas 375 mm (14,75 po) avec support double
Longueur totale en extension maximale	1.829 mm (72 po)
Dossier fin flexible	25 mm (1 po)
Pivot du fauteuil	60° (30° de chaque côté du centre)
Inversion gauche/droite	Oui
Dossier flexible	Oui
tête à double articulation	Oui
Alimentation électrique intégrée 300 watts	Oui
Commande au doigt ou pédale	Les deux
Système de levage hydraulique	Oui
Options de la garniture	Avec ou sans coutures
Options du support d'écran	Éclairage, bras d'écran
Compatibilité d'unit	A-dec 300 Radius Traditional, A-dec 300 Radius Continental, A-dec 500 12-o'clock duo, A-dec 500 side

Units

	A-dec 333 Continental A-dec 332 Traditional (Radius)	A-dec 541 12-o'clock duo	A-dec 542 side
Bloc de commande	3 positions standard, 4 positions en option	4 positions	4 positions
Inversion gauche/droite facilitée	Oui	Oui	Non
Positions du porte-instruments	4	4	4
Poignée(s) de frein	1 standard, 2e en option	ND	1
Clavier Deluxe disponible	Oui	Oui	Oui
Source de lumière intra-buccale quad-volt	En option	Standard	Standard
Pédale	Humide/sec	Commande humide/sec avec soufflerie d'éclats	Commande humide/sec avec soufflerie d'éclats
Bras flexible équilibré avec frein pneumatique	Oui	ND	Oui





Partenaire de votre réussite



A-dec restera votre partenaire tout au long de votre carrière de praticien. Depuis notre siège social de Newberg dans l'Oregon, nous intervenons auprès de bureaux internationaux et gérons un réseau de distributeurs agréés présents dans plus de 100 pays du monde entier.

Découvrez les plus d'A-dec. Visitez la page a-dec.com/lesplus pour découvrir à quel point chaque détail d'une solution A-dec compte pour garantir la fiabilité et la longévité de votre investissement.



Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 États-Unis
Tél. : +1 800 547-1883 (États-Unis/Canada)
Tél. : 1.503.538.7478 (hors États-Unis/Canada)
Fax : +1.1.503.538.0276
a-dec.com

Centres de distribution internationale

A-dec Australie

Tél. : 1.800.225.010
(Australie)
Tél. : +61.(0)2 8332 4000
(hors de l'Australie)
a-dec.com.au

A-dec Royaume-Uni

Tél. : 0800.ADEC.UK (2332.85)
(Royaume-Uni)
Tél. : +44.(0).24.7635.0901
(hors du Royaume-Uni)
a-dec.co.uk

A-dec, le logo A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC et Radius sont des marques de fabrique de A-dec Inc. et ont été déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline et reliablecreativesolutions sont également des marques d'A-dec Inc. Aucune des marques ou appellations commerciales citées dans ce document ne peut être reproduite, copiée ou manipulée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de son propriétaire.

Les symboles du clavier sont la propriété d'A-dec Inc. L'utilisation de ces symboles, en tout ou partie, sans le consentement écrit exprès d'A-dec Inc. est strictement interdite.

Les couleurs et les produits pourront être différents selon la matière employée et ils sont sujets à modification sans préavis. Pour des échantillons des couleurs et les dernières informations sur les produits, veuillez vous adresser à votre revendeur A-dec.