


**PÉRIOSTES  
CURETTES  
CHIRURGICALES ET  
PORTE-LAME DE  
BISTOURI**

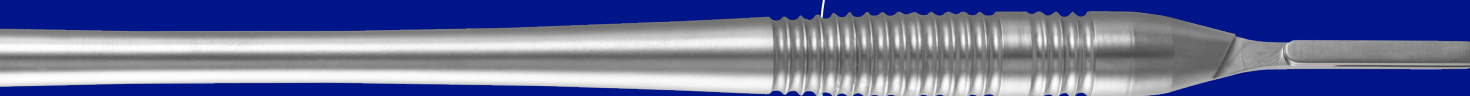

Le porte-lame de bistouri rond permet une coupe précise et un réajustement facile.

Les manches ronds ergonomiques permettent une **transmission directe et contrôlée de la force**. La finition mate de la surface évite les reflets gênants. La structure rainurée MacroGrip des manches **offre une prise sûre et est facile à nettoyer**.

Lors de la sélection des périostes, l'accent a été mis sur les différentes exigences cliniques, par exemple, la préparation du lambeau mucopériosté, l'incision initiale, l'élévation des papilles, etc. Les extrémités coupantes sont fabriquées en acier chirurgical spécialement trempé pour une meilleure durabilité et sont disponibles en différentes combinaisons.

Les curettes chirurgicales Lucas ont des extrémités de travail allongées pour un bon accès à l'alvéole d'extraction. Elles sont disponibles dans les trois diamètres de lame les plus courants.

<b>AESSH5</b>	<b>Manche de la lame de scalpel, ergonomique</b> Le manche rond ergonomique offre un maximum de confort pour une grande variété d'incisions et est facile à réajuster.
<b>AESSCLU11</b>	<b>Curette chirurgicale Lucas, 2,0 mm, ergonomique</b>
<b>AESSCLU22</b>	<b>Curette chirurgicale Lucas, 2,5 mm, ergonomique</b>
<b>AESSCLU33</b>	<b>Curette chirurgicale Lucas, 3,0 mm, ergonomique</b> Curette Lucas / grattoir Lucas. Les extrémités précises sont conçues pour le curetage osseux, le débridement de l'alvéole après extraction et l'élimination des kystes.

<b>AESPPR3S</b>	<b>Périoste Prichard PR-3, ergonomique</b> L'élévateur de Prichard peut être utilisé de manière universelle et se compose d'un raspatoire et d'un écarteur.
<b>AESPGSP</b>	<b>Périoste Glickmann 24, ergonomique</b> L'élévateur Glickman se compose d'une râpe fine et tranchante d'un côté et d'une lame triangulaire tranchante de l'autre.
<b>AESPGF14</b>	<b>Périoste Goldmann Fox 14, ergonomique</b> L'élévateur Goldman-Fox est à double extrémité avec une râpe fine et pointue d'un côté et une râpe pointue et plus large de l'autre.
<b>AESPP9PA</b>	<b>Périoste Allen P9, ergonomique</b> L'élévateur P9/PA est à double extrémité, avec une râpe large et pointue d'un côté et une râpe pointue en forme de goutte d'eau de l'autre.
<b>AESPWI06</b>	<b>Élévateur Williger 160 x 6 mm</b> L'élévateur de Williger est à extrémité unique, avec une extrémité fine, courbée et très longue. L'élévateur est doté d'un manche plat et légèrement nervuré qui permet un excellent contrôle et un bon positionnement de la lame pendant le traitement.
<b>AESPBU</b>	<b>Périoste Buser, ergonomique</b> L'élévateur Buser est à double extrémité, avec un bout en forme de bêche et un bout rond. L'extrémité en forme de bêche est utilisée pour disséquer les papilles et la marge gingivale marginale. La dissection du lambeau mucopériosté se poursuit avec l'extrémité arrondie de l'élévateur, qui permet de disséquer le lambeau sans endommager le tissu.
<b>AESPM</b>	<b>Périoste Molt 10, ergonomique</b> L'élévateur Molt a deux extrémités de taille différente : en forme de cuillère et tranchantes.