


CISEAUX

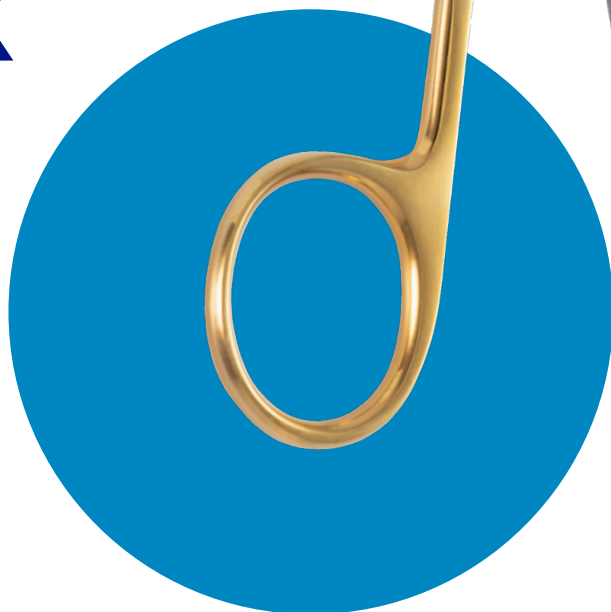

Nos ciseaux de précision sont fabriqués selon les règles de l'art chirurgical les plus strictes.

Grâce à la finition manuelle minutieuse et à la légère flexibilité de l'articulation, les ciseaux American Eagle permettent de réaliser des **incisions précises sur la surface de coupe, sur toute la longueur de la lame.**

Les instruments de coupe American Eagle sont fabriqués en acier trempé pour garantir leur stabilité et leur durabilité.

Ciseaux SuperCut : l'affûtage spécial des lames permet de réaliser des coupes aussi fines, nettes et précises qu'avec un scalpel. L'une des lames est micro crantée et permet de maintenir fermement **les tissus mous et le matériel de suture**. La lame opposée SuperCut, tranchante comme un rasoir, n'effiloche pas les tissus mous et épouse les contours avec précision.

AESSIRS	Ciseaux à iris, droits, 11 cm Initialement conçus pour les interventions ophtalmologiques, les ciseaux à iris ont des lames particulièrement fines.
AESSIRSSC	Ciseaux à iris, droits, 11 cm, SuperCut
AESSIRC	Ciseaux à iris, courbés, 11 cm
AESSIRCSC	Ciseaux à iris, courbés, 11 cm SuperCut
AESSLGSC	Ciseaux La-Grange en forme de S, SuperCut, 11,5 cm La courbe en S des ciseaux La-Grange suit au maximum l'anatomie buccale. Le retrait des sutures, dans les endroits difficiles d'accès, en est facilité. Affûtage Super Cut.

AESSSUTS	Ciseaux à suture de Spencer, droits, 12,5 cm Spécialement conçu pour l'ablation des sutures, l'une des lames est munie d'un petit crochet qui maintient en place les sutures avant de les couper. La lame courte permet une coupe précise et efficace.
AESSGFSSC	Ciseaux Goldman-Fox, droits, SuperCut, 13 cm Les ciseaux Goldman-Fox ont été spécialement conçus pour la chirurgie dentaire. Ils ont des lames finement usinées à la pointe et une section robuste à l'arrière du tranchant, cela signifie que la pointe peut être utilisée avec une précision maximale dans les endroits les plus difficiles d'accès. Affûtage Super Cut.
AESSGFSC	Ciseaux Goldman-Fox, courbés, SuperCut, 13 cm Version incurvée pour un meilleur accès dans les endroits difficiles d'accès.
AESSMETSSC	Ciseaux à dissection Metzenbaum, courbés, SuperCut, 14 cm Les ciseaux Metzenbaum ont des lames courtes et fines avec des pointes arrondies. Ils minimisent le risque de blesser accidentellement les tissus mous dans les endroits difficiles d'accès.
AESSUFSC	Ciseaux ultra fins, SuperCut Les ciseaux ultrafins American Eagle offrent le meilleur des deux mondes : la précision des micro-ciseaux et le maniement familier des ciseaux standard. Les extrémités ultrafines permettent de couper les tissus avec une précision similaire à celle des micro-ciseaux. L'affûtage SuperCut de l'une des lames permet de réaliser des incisions aussi facilement et précisément qu'avec un scalpel. La seconde lame est micro crantée et permet de maintenir fermement les tissus mous et le matériel de suture. La lame SuperCut, tranchante comme un rasoir, empêche les tissus mous de s'effiloche et assure une protection maximale. Variante incurvée pour un meilleur accès aux endroits difficiles d'accès.