

EXTRACTIETANG





De extractietangen van American Eagle Instruments® met lichtere, ergonomische heften en een glad, mat oppervlak zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen.


De anatomisch gevormde bekken van de standaard extractietang zijn ontworpen met een kleeftprofiel voor een **stevige grip**, waardoor ze met weinig moeite kunnen worden gebruikt. Een Teflon-schijf in de instrumentaansluiting zorgt voor bewegingsgemak en voorkomt corrosie.

Het assortiment telt ook enkele speciale tangen:

Deep Grip: diepgrijpende extractietangen met lichtjes geslepen tangbekken die verlengd zijn en taps naar de punt toelopen. Deze tangen kunnen onder het tandvlees worden geplaatst en verdelen de druk over een groter gebied van de vaak al verzwakte kroon- en wortelstructuur.

Extractietang voor wortels en wortelresten: deze in S-vorm gebogen Witzel-tang is door zijn vorm vrijwel universeel inzetbaar. **Slechts één worteltang voor alle kwadranten!** De verlengde bek van de tang, die taps naar de punt toeloopt, is voorzien van een diamantcoating voor een stevige grip, zelfs bij zeer fijne wortelresten.

Er zijn nog drie andere varianten met extra scherpe bekken of lemmeten beschikbaar die een stevige grip garanderen: voor bijzonder arbeidsintensieve verwijdering van wortelresten diep in de tandkas (AESRFLO, AESRFUN, AESRFUP).

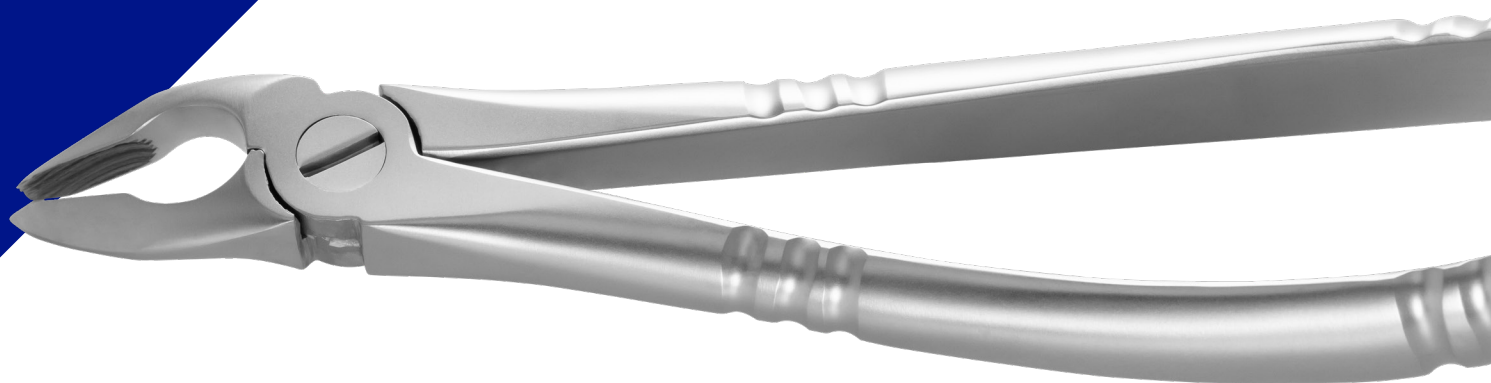

AESEFSET	Standaard extractietangenset Standaard extractietangenset, inclusief 10 tangen: voor bovenste snijtanden en hoektanden, voor bovenste premolaren, voor molaren rechtsboven, voor molaren linksboven, voor bovenste verstandskiezen, voor bovenste wortels, voor onderste hoektanden en premolaren, voor onderste molaren aan beide zijden, voor onderste wortels en voor onderste verstandskiezen (AESEFCUI, AESEFCUP, AESEFCLI, AESEFCURM, AESEFCULM, AESEFCLM, AESEFCLR, AESEFCUR, AESEFCU3M, AESEFCL3M)		
AESEFUI	Deep Grip extractietang voor bovenste snijtanden	AESEFCURM	Standaard extractietang nr. 17 molaren rechtsboven
AESEFUC	Deep Grip extractietang voor bovenste hoektanden en premolaren	AESEFCULM	Standaard extractietang nr. 18 molaren linksboven
AESEFLCP	Deep Grip extractietang voor onderste voortanden, hoektanden en premolaren	AESEFCLM	Standaard extractietang nr. 22 onderste molaren
AESEFR	Deep Grip extractietang voor onderste wortels en smalle snijtanden	AESEFCLR	Standaard extractietang nr. 33 onderste wortels
AESEFUM	Deep Grip extractietang voor bovenste molaren en verstandskiezen	AESEFCUR	Standaard extractietang nr. 51A bovenste wortels
AESEFLM	Deep Grip extractietang voor onderste molaren en verstandskiezen	AESEFCU3M	Extractietang nr. 67A met antislipprofiel voor bovenste verstandskiezen aan beide zijden
AESEFRW	Witzel universele wortel extractietang met diamantcoating	AESEFCL3M	Extractietang nr. 79 met antislipprofiel voor onderste verstandskiezen aan beide zijden
AESEFCUI	Standaard extractietang nr. 2 bovenste snijtanden en hoektanden	AESRFLO	Wortel extractietang - onderaan
AESEFCUP	Standaard extractietang nr. 7 bovenste premolaren	AESRFUN	Wortel extractietang - universeel
AESEFCLI	Standaard extractietang nr. 13 onderste snijtanden, hoektanden en premolaren	AESRFUP	Wortel extractietang - bovenaan