




ART³: L'OBTURATION EN MASSE REDÉFINIE

Obtenez des restaurations plus vraies que nature grâce à la nouvelle génération de la technologie de réponse adaptative (ART) cliniquement éprouvée à la base des composites Harmonize™ et SimpliShade Universal Composite. Reposant sur la technologie de réponse adaptative améliorée, SimpliShade Bulk Fill permet une manipulation aisée et un faible taux de rétraction.

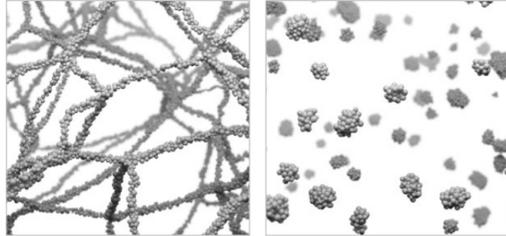


Technologie de réponse rhéologique adaptative pour une facilité de sculptage

ART3 utilise des modificateurs rhéologiques qui réduisent la viscosité du composite au fur et à mesure que vous le manipulez. Une fois la mise en forme achevée, la viscosité est restituée et l'anatomie se stabilise avant la photopolymérisation, ce qui diminue le besoin de reprise de la sculpture.

Technologie d'harmonisation colorimétrique adaptative pour une élégante intégration

Obtenez une intégration exceptionnelle avec des nanocharges spécifiques qui reproduisent les structures amélaire et interagissent avec la lumière de manière naturelle. La restauration et la dent deviennent quasiment indifférenciables.

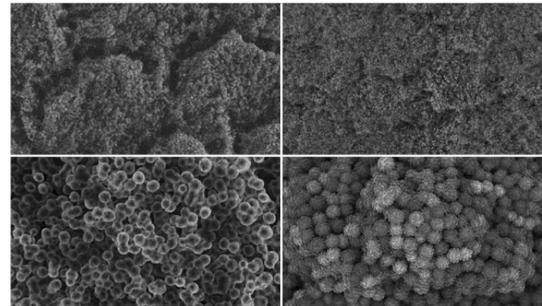


Émail humain

SimpliShade Bulk Fill

Technologie de réponse adaptative à la contrainte de retrait pour des résultats durables

Au cours de la polymérisation, SimpliShade Bulk Fill intègre une résine à faible taux de rétraction et une composition innovante à base de nanocharges. Ces nanocharges à infusion de résine accélèrent l'élasticité pour une réduction du stress et un revêtement spécial soulageant la contrainte interfaciale. Réunissant trois mécanismes de réduction de la contrainte de retrait, il améliore l'adaptation et l'intégrité marginales par la minimisation de la contrainte que la restauration composite exerce sur la couche adhésive pour une adaptation marginale améliorée.

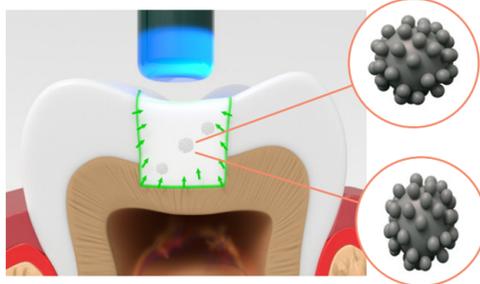

Découvrez-en plus sur ART³ et l'effet sur la contrainte de retrait

Références de commande



SimpliShade Bulk Fill

N° pièce	Description
37211	Seringue SimpliShade Bulk Fill Composite
37212	20 compules SimpliShade Bulk Fill Composite Unidose

RESTEZ EN FAMILLE

avec notre gamme complète de produits SimpliShade !



SimpliShade Bulk Fill Flow

N° pièce	Description
37217	Seringue SimpliShade Bulk Fill Flow
37218	20 compules SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose



SimpliShade Universal Composite

Unidoses		Seringue	
N° pièce	Description	N° pièce	Description
37006	Light - 20 compules	37001	Light
37007	Medium - 20 compules	37002	Medium
37008	Dark - 10 compules	37003	Dark
37009	Bleach White - 10 compules	37004	Bleach White
37010	Universal Opaque - 10 compules	37005	Universal Opaque



Pour une finition ultrabrillante, optez pour la gamme Kerr de polissoirs !



Une teinte. Une étape. La meilleure méthode d'obturation en masse.

Pour plus d'informations, scannez le code QR ou visitez le site to.kerrdental.com/fr/simplishadebulkfill

Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présentés sur ce flyer est fabriqué par la société Kerr - Organisme notifié : 2797

EH France SAS | Kerr dental | 45-47 Boulevard Paul Vaillant Couturier | 94200 Ivry Sur Seine
Tél. : 01 48 90 77 77 | www.kerrdental.com/fr-fr/

©2023 Kerr Corporation. Toutes les marques déposées applicables à Kerr/ou ses produits sont la propriété de Kerr Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leur détenteur respectif. Tous droits réservés. Données internes. MKT-23-1650-FR



SimpliShade™ BULK FILL



Simplification avec une teinte et en une étape

Les restaurations esthétiques ne pourraient être plus simples, avec SimpliShade™ Bulk Fill. Vous pouvez éviter la couche de revêtement par un positionnement en une étape et réduisez les besoins d'inventaire avec une teinte pour l'ensemble des 16 teintes classiques VITA®. Reposant sur la technologie de réponse adaptative ternaire (ART³), SimpliShade Bulk Fill est facile à manipuler avec une faible contrainte de retrait.



UNE TEINTE, ET C'EST TOUT

Obtenez l'adaptabilité, la durabilité, la profondeur de polymérisation et la simplicité dont vous avez besoin avec SimpliShade Bulk Fill.

SimpliShade™ Bulk Fill est indiqué pour les restaurations de classe I à V - positionnement direct de restaurations antérieures et postérieures, reconstitutions coronaires et réparation de défauts de restauration.



Système à teinte unique

L'usage d'une teinte qui s'harmonise à la perfection à l'ensemble des 16 teintes classiques VITA®, SimpliShade Bulk Fill vous permet un gain de temps dans la sélection de teintes et la gestion de l'inventaire.



Une étape

Rend superflue toute couche de revêtement, restaurations complètes avec un composite SingleFill™. Affichant un mécanisme de polymérisation amélioré, SimpliShade Bulk Fill permet d'atteindre aisément des profondeurs de polymérisation allant jusqu'à 5 mm en une étape.



Simplicité et durabilité

SimpliShade Bulk Fill offre un faible taux d'usure, une résistance élevée à la flexion et une contrainte de retrait comparable aux autres marques de bulk fill du marché, en gardant vos restaurations plus forte et durable.




Effet caméléon

L'architecture spéciale des nanocharges reproduit la structure amélaire naturelle et interagit avec la lumière pour une harmonisation quasiment indifférenciable.


Résistance à la flexion

SimpliShade Bulk Fill présente une résistance à la flexion similaire ou supérieure à celle de Filtek™ One Bulk Fill, Tetric® PowerFill et Admira® Fusion x-tra, ce qui se traduit par une meilleure résistance à l'usure à long terme et une plus grande résistance à la fracture.

Flexural Strength (MPa)

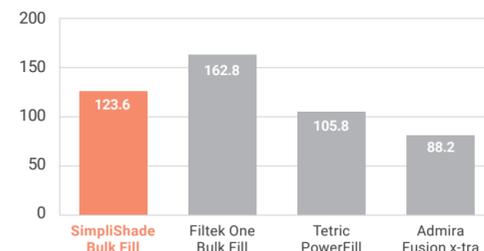

Flexural Modulus (GPa)

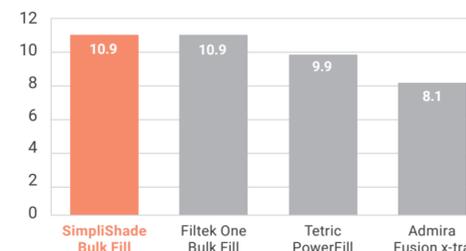


Authors: Drs. Jack L. Ferracane and Carmem S. Pfeifer, Oregon Health & Science University, Portland, OR.

Maintien de la brillance

SimpliShade Bulk Fill a le maintien de brillance la plus élevée par rapport à Filtek One Bulk Fill et Admira Fusion x-tra. Cela signifie que le brillant esthétique initial de la restauration est conservé plus longtemps.

Loss of Gloss (GU)

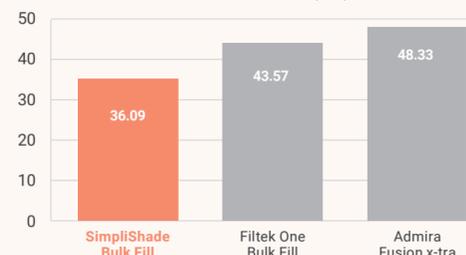

Authors: Prof. Dr. Nate Lawson, University of Alabama at Birmingham, Birmingham, AL.

Témoignages de clients



"Le SimpliShade Bulk Fill révolutionne mon approche des composites pour les restaurations des molaires et prémolaires. Sa praticité et sa facilité d'utilisation avec des instruments dentaires de base sont inégalées."

Dr. Maciej Mikołajczyk
Lodz, Pologne



"SimpliShade Bulk Fill offre une solution trois-en-un avec sa teinte universelle, sa consistance idéale et son excellente adaptabilité pour plus de simplicité et d'efficacité."

Prof. Joseph Sabbagh
Bruxelles, Belgique



"Composite d'une consistance idéale qui permet une application et un modelage faciles. Protocole de travail simple et rapide, superbe mimétisme."


Dr. Dimitar Kosturkov
Sofia, Bulgarie

* Paid consultant for Kerr




Propriétés de manipulation

La technologie de réponse rhéologique adaptative réduit la viscosité en cours de manipulation pour un sculptage et une mise en forme facilités.

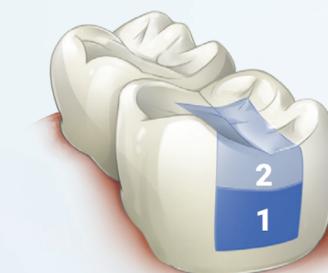

Usage de composite fluide (1) et revêtement par SimpliShade Bulk Fill (2)

Améliorez le scellement et l'adaptation par l'application de composite fluide en vue du revêtement de la cavité (jusqu'à 2 mm). Puis, obtenez simplement et sans effort les cavités avec SimpliShade BF jusqu'à 5 mm.

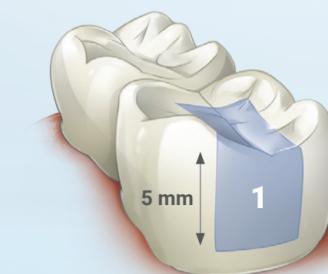

Utilisation uniquement de Bulk Fill pour 5 mm

Obturer des cavités de manière simple et sans effort avec SimpliShade BF jusqu'à 5 mm.