



SafeJet™

Tips voor eenmalig gebruik voor de multifunctiespuit

Hygienische Einwegansätze für die Multifunktionspritze. Überzeugen durch eine zuverlässige Trennung von Luft und Wasser und einen sicheren Halt an der Spritze. Kompatibel mit allen SafeJet™, Pro-Tip® oder Pro-Tip® Turbo* Adaptern.



*PRO-TIP en PRO-TIP TURBO zijn geregistreerde handelsmerken van ASTEK INNOVATIONS LIMITED. De producten van Medicom worden niet goedgekeurd door Astek, zijn niet rechtstreeks verbonden met Astek, worden niet onderhouden, goedgekeurd of gesponsord door Astek.



Smal canuleontwerp voor optimale zichtbaarheid en gemakkelijke toegang

Geïntegreerd tweekanaalsysteem zorgt op betrouwbare wijze voor de scheiding van lucht en water

Afgeronde vorm voor optimaal comfort voor de patiënt

Stevig ontwerp maakt het mogelijk om de wang af te houden

Gripgebied met vier uitsparingen voor eenvoudige en snelle bevestiging


Veilige montage dankzij bajonetvergrendelingssysteem

Tweekanaalsysteem

SafeJet™ tips hebben twee afzonderlijke kanalen. Voor een schone, droge luchtstroom, een nauwkeurige waterstraal en een uniforme sproeifunctie.




Directe aansluiting op het centrale waterkanaal van de adapter

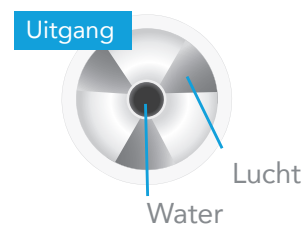

Eenvoudige montage



Plaats de tip met de opening van de bajonet-vergrendelingsgroef ter hoogte van de puntmarkering op de adapter.

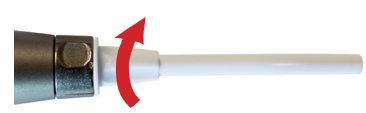

Om te fixeren draait u de SafeJet-bevestiging iets met de klok mee – klaar!



Medicom
SafeJet™
Tips voor eenmalig gebruik
MD Class IIa
Inhoud: 250 stuks
Kleur: wit
Art.-nr.: 1007074